


# XTRACTR

含量均一性試験・定量試験用サンプル  
高速抽出装置 抽出時間：1/10

## 温度の監視と制御

- 個々の抽出容器 Xtainerの非接触温度検出
- 「オフ」温度に達するとモーターが自動シャットダウンし、「オン」温度に達すると自動再起動します。

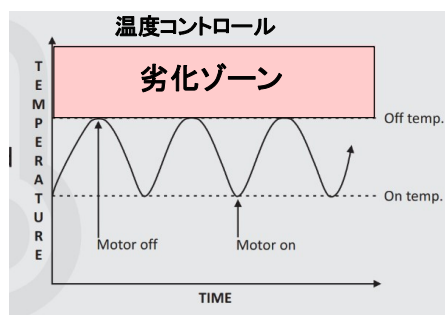

## アプリケーション

- 含量均一性、定量および不純物試験サンプルのための高速かつ効率的な10サンプル同時高速抽出装置
- USP <905> によれば、25 mg 以下の原薬を含む製剤には含量均一性試験が要求されます。

## ユーザーフレンドリーなインターフェース

- シンプルで操作しやすいLCDディスプレイ
- 10 メソッドのストレージ容量
- シリアルプリンターによるレポート印刷

## 堅牢な設計

- 10連個別給電クローズドシステム
- Xtainerのサイズ(容量)の自動検出
- あらゆる製剤と含量に対応する Xtainerのサイズ (50ml、250ml、500ml)
- 遮光用のアンバー タイプ Xtainer
- ネジ付き蓋が Xtainer の内容物を安全に保護
- 高速回転刃による強力な粉砕力
- 失速時に回転方向を反転できるモーター
- 機器の状態を示す音声と視覚アラート

